

# MODE D'EMPLOI

Cet adaptateur sert à conduire le son vers les microphones d'implant cochléaire. Il est utilisable avec tout types d'écouteurs et de casques.


## Contenu de la boîte

- deux adaptateurs
- des lingettes désinfectantes

## Conseils de nettoyage


Toutes les 5 utilisations, désinfecter l'embout en silicone avec une lingette. Après 20 utilisations, le tremper dans un bain d'eau tiède légèrement savonneuse et le frotter légèrement. Bien le sécher avant de le stocker. Eviter toute solution désinfectante à base d'alcool.

## Sens

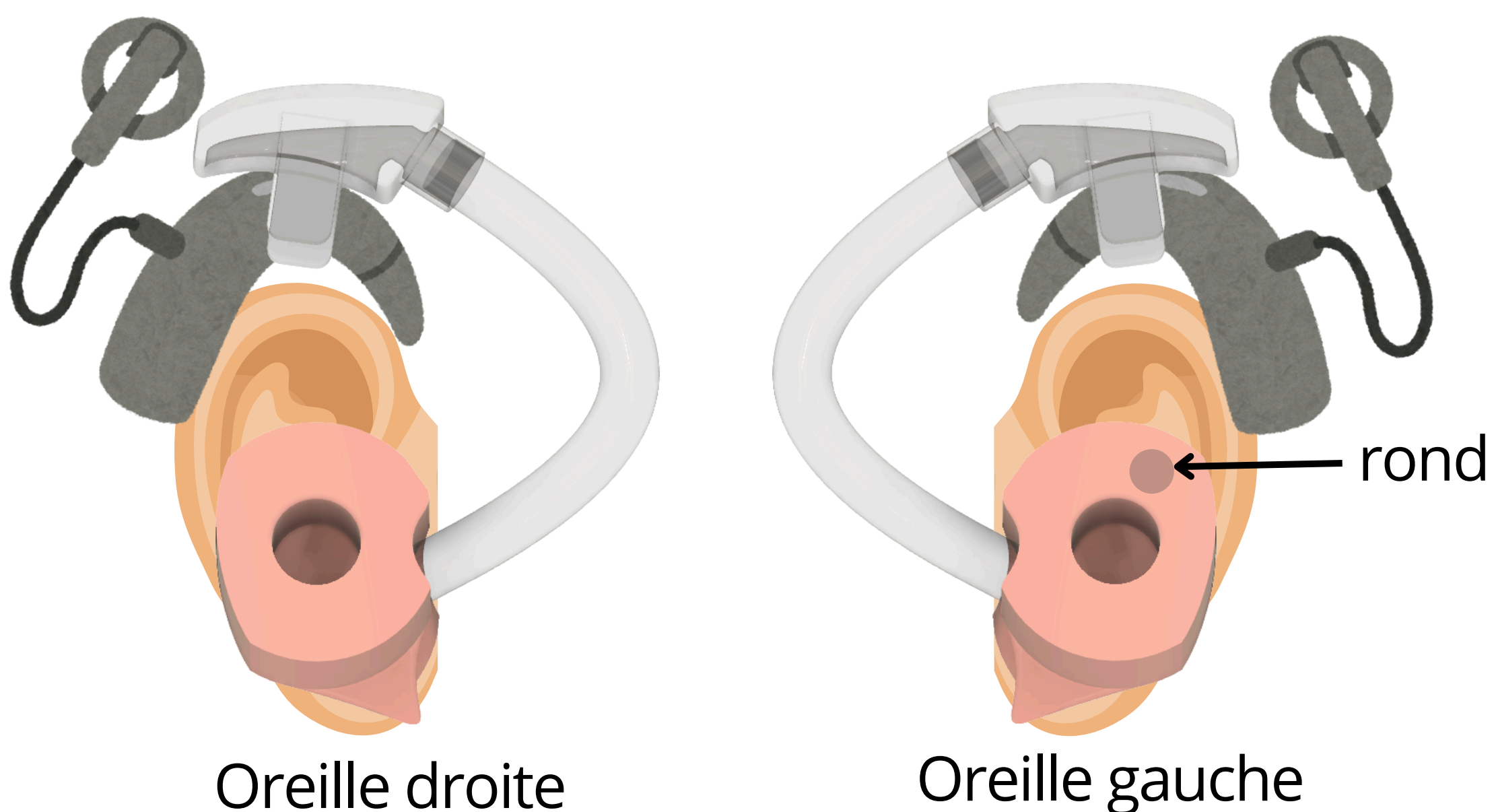


## Avec des écouteurs

- 1- Mettre les écouteurs dans le silicone.
- 2- Retirer l'appareil cochléaire et fixer la fixation dessus.
- 3- Remettre l'appareil cochléaire et placer l'embout en silicone dans l'oreille.
- 4- Pour l'enlever faire les étapes inverses.

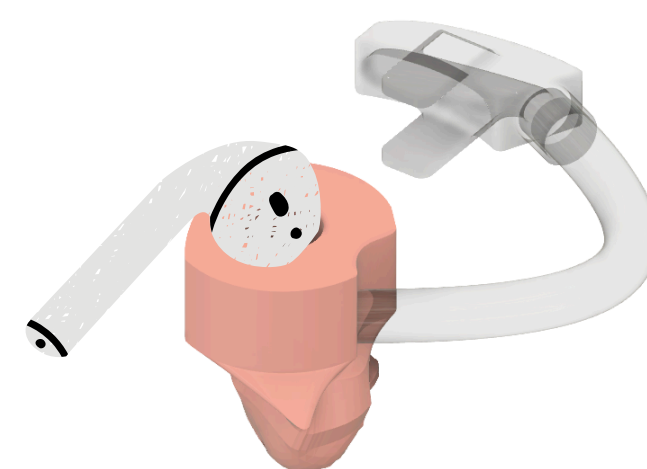

## Avec un casque

- 1- Retirer l'appareil cochléaire et fixer la fixation dessus.
- 2- Remettre l'appareil cochléaire et mettre le casque.
- 3- Pour l'enlever faire les étapes inverses.

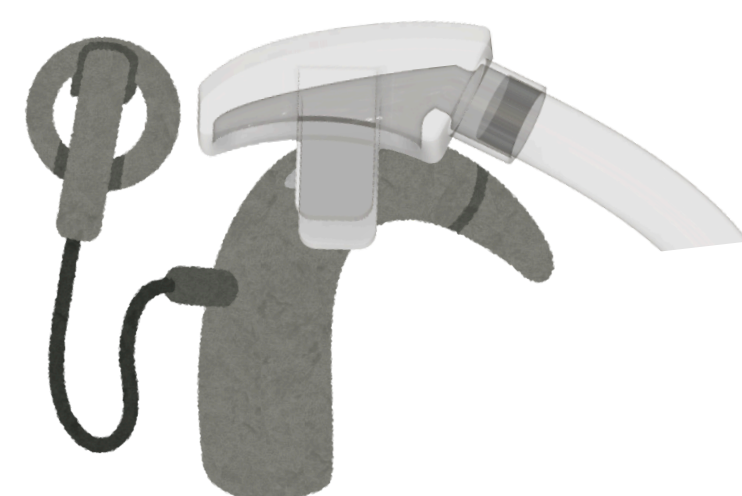

## Attention

- l'adaptateur est water-proof mais ne protège pas l'implant de l'eau
- l'adaptateur ne peut être porté que par la personne pour qui il a été désigné, au risque d'être inconfortable

## Contact

Pour toutes questions contactez [info@hackahealth.ch](mailto:info@hackahealth.ch)